

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ VẬN HÀNH THIẾT BỊ

Thiết bị: Máy Giám Sát Và Cảnh Báo Tư Thế Ngồi

Phiên bản hướng dẫn: v1.1.2

Ngày cập nhật: 2026-09-20

1. HƯỚNG DẪN BẮT ĐẦU NHANH

Bước 1: Đeo thiết bị lên cơ thể


1. Gắn thiết bị vào dây đeo ngực hoặc kẹp vào cổ áo / mặt sau áo bằng ngàm kẹp tích hợp.
2. **Vị trí chuẩn:** Đặt thiết bị nằm dọc chính giữa lưng trên, ở khoảng giữa hai bả vai.
3. **Chiều thiết bị:** Cổng sạc Type-C hướng xuống dưới, mặt có nút bấm và đèn báo hướng ra ngoài.



Hình 1: Mặt trước: Nút bấm và đèn báo



Hình 2: Cạnh bên: Ngàm kẹp áo và cổng Type-C

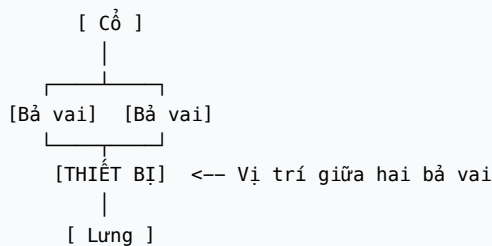

Bước 2: Bật nguồn thiết bị

- Bật công tắc nguồn hoặc cắm sạc qua cổng sạc Type-C ở cạnh dưới máy.
- Đèn báo trạng thái sẽ nhấp nháy nhanh 3 lần để xác nhận thiết bị đã sẵn sàng.
- Thiết bị rung nhẹ 1 nhịp báo hiệu bắt đầu làm việc.

2. THAO TÁC VỚI NÚT BẮM

Thiết bị chỉ có một nút bấm duy nhất trên thân máy, hỗ trợ 3 thao tác cơ bản:

[Nút bấm]	—	Bấm 1 lần	----> Tắt rung cảnh báo tức thì
		Bấm 2 lần	----> Tạm dừng theo dõi trong 10 phút
		Giữ 2 giây	----> Lấy lại tư thế chuẩn (Hiệu chuẩn)

Thao tác	Cách thực hiện	Phản hồi từ thiết bị	Chức năng
Bấm 1 lần	Nhấn và thả ngay	Thiết bị ngừng rung ngay lập tức	Tắt cảnh báo hiện tại nếu bạn chưa thể ngồi thẳng lưng ngay.
Bấm đúp (2 lần)	Nhấn 2 lần liên tiếp	Rung nhẹ 2 nhịp ngắn	Tạm dừng 10 phút: Tắt toàn bộ rung nhắc nhở khi bạn đứng dậy đi lại hoặc nghỉ ngơi.
Nhấn giữ	Nhấn và giữ trong 2 giây	Rung dài 1 nhịp	Hiệu chuẩn tư thế: Đặt lại mốc chuẩn cho dáng ngồi hiện tại của bạn.

3. BẢNG MÃ ĐÈN BÁO TRẠNG THÁI

Đèn báo trên thiết bị giúp bạn nhận biết tình trạng hoạt động nhanh chóng:

Kiểu nhấp nháy	Tần suất đèn	Trạng thái thiết bị	Ý nghĩa và hành động
Chớp nhanh 3 lần	Ngay khi mở nguồn	Khởi động hoàn tất	Thiết bị đã sẵn sàng làm việc.
Chớp nhẹ theo nhịp	2 giây chớp 1 lần	Tư thế chuẩn	Bạn đang ngồi thẳng lưng đúng cách.
Nhấp nháy đều đặn	Chớp tắt liên tục	Cảnh báo sai tư thế	Bạn đang có dấu hiệu gù lưng hoặc nghiêng người.
Nhấp nháy dồn dập	Chớp rất nhanh kèm rung	Báo động sai tư thế	Bạn đã ngồi sai tư thế quá lâu, cần điều chỉnh lại.
Chớp chậm	Chớp tắt cách quãng chậm	Đang tạm dừng	Thiết bị đang trong thời gian nghỉ 10 phút.
Chớp liên tục siêu tốc	Nhấp nháy liên tục không nghỉ	Đang hiệu chuẩn	Thiết bị đang đo dáng ngồi, vui lòng giữ yên người.
Sáng mờ hoặc tắt hẳn	Đèn đứng yên hoặc không sáng	Pin yếu hoặc cần kiểm tra	Cắm sạc pin cho thiết bị.

Thiết bị phát sóng mạng không dây cục bộ, cho phép theo dõi tư thế trực tiếp trên điện thoại hoặc máy tính mà không cần cài đặt phần mềm hay kết nối internet:

Tư thế

GOOD

You're sitting upright

95

ĐIỂM TƯ THẾ

🕒

Tạm hoãn
10p

🕒

Hiệu chuẩn
0

Tổng quan hôm nay

02h 45m monitored

Tư thế tốt

Độ lệch TB



Hôm nay



Lịch sử



Thiết bị

<

192.168.4.1

↻

...

1. Mô hình 3D cột sống:

- Hiện thị mô phỏng dáng ngồi theo thời gian thực.
 - Vuốt trên màn hình để xoay góc nhìn quanh cơ thể.
 - Chụm / mở hai ngón tay để phóng to, thu nhỏ.
 - Nút đặt lại góc nhìn đưa camera về vị trí mặc định.
2. **Thông số góc nghiêng cơ thể:**
- **Góc cúi/ngửa:** Độ gập lưng về trước (bằng 0 khi ngồi thẳng).
 - **Góc nghiêng vai:** Độ lệch vai sang trái / phải.
 - **Góc xoay người:** Độ vặn quanh trục cột sống.
 - **Tổng độ lệch:** Độ lệch tổng thể so với tư thế chuẩn.
3. **Biểu đồ hoạt động:**
- Đồ thị diễn biến 30 giây gần nhất kèm vạch ngưỡng cảnh báo.
4. **Thống kê và lịch sử:**
- Theo dõi chất lượng tư thế theo từng giờ trong ngày.
 - Tỷ lệ % thời gian ngồi đúng và thời gian ngồi gù lưng.
 - Nút xuất dữ liệu để tải báo cáo về máy.

3

5. QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN TƯ THẾ CHUẨN

Hiệu chuẩn là bước quan trọng nhất để thiết bị ghi nhận đúng dáng vóc chuẩn của từng người:

4 ĐIỂM TƯ THẾ CHUẨN

1. Lưng tựa thẳng tự nhiên vào ghế.
2. Hai vai thả lỏng, cân bằng.
3. Cằm song song sàn, nhìn thẳng.
4. Hai bàn chân đặt phẳng trên sàn.

Các bước thực hiện:

1. Ngồi vào tư thế chuẩn theo 4 điểm.
2. **Thao tác:** Nhấn giữ nút 2 giây hoặc bấm nút “Hiệu chuẩn” trên trang web.
3. **Giữ yên cơ thể trong 3 giây:** Đèn báo chớp rất nhanh trong lúc máy đo.
4. Khi hoàn thành, thiết bị rung 2 nhịp ngắn xác nhận lưu thành công.

6. CẬP NHẬT PHẦN MỀM KHÔNG DÂY

Khi có phiên bản phần mềm mới, bạn có thể cập nhật trực tiếp qua trang web mà không cần cắm dây cáp:

```
[ Điện thoại / Máy tính ]
|
▼ Chọn file nâng cấp mới
Trang web (http://192.168.4.1 -> "Thiết bị")
|
▼ Bấm "Cập nhật"
[ Thiết bị tiếp nhận & tự động nâng cấp ]
|
▼
[ Tự động khởi động lại khi hoàn tất ]
```

Lưu ý quan trọng khi cập nhật:

1. Đảm bảo pin trên 20% trước khi thực hiện.
2. Không tắt nguồn thiết bị hoặc ngắt kết nối mạng khi đang nạp (khoảng 15 giây).
3. Sau khi nạp xong, thiết bị tự khởi động lại và hoạt động bình thường.

7. XỬ LÝ SỰ CỐ THƯỜNG GẶP

Hiện tượng	Nguyên nhân có thể	Cách khắc phục
Đèn sáng đúng yên hoặc báo lỗi	Thiết bị gặp gián đoạn tiếp xúc nội bộ	Tắt nguồn, chờ 5 giây rồi bật lại. Nếu vẫn bị, liên hệ kỹ thuật để được hỗ trợ.
Không thấy Wi-Fi Posture-Monitor-AP	Thiết bị đang tắt hoặc đã hết pin	Bật công tắc nguồn hoặc cắm cáp sạc pin cho thiết bị.
Mô hình 3D lệch khi ngồi thẳng	Chưa lấy mốc tư thế cho dáng người của bạn	Ngồi thẳng lưng đúng tư thế chuẩn và nhấn giữ nút 2 giây để hiệu chuẩn lại.
Thiết bị không rung khi ngồi gù	Tính năng rung tắt trong cài đặt hoặc pin yếu	Mở trang web, bật công tắc “Động cơ rung”, đồng thời cắm sạc pin.